

Лекарство срещу парене в сливиците Инструкции за употреба

Само за Rx употреба. Регулаторните разпоредби ограничават продажбата на устройството само по предписание на лекар или друго упълномощено медицинско лице.

УПОТРЕБА СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Това устройство е замислено специално за подаване на медицински субстанции с цел лечение на заболявания на гърлото. Това лекарство трябва да се използва само в количеството и на интервалите, които са предписани от вашия лекар. По-честата употреба или дозите над препоръваните количества могат да доведат до вредни ефекти.

1. Свалете прозрачното капаче.
2. Удължете пръскащия накрайник и задръжте насочен към вас (**БЕЛЕЖКА:** накрайникът трябва да е под прав ъгъл за правилно използване).
3. Хванете шишенцете здраво с показалеца върху пръскащата глава.
4. Насочете накрайника директно към желаната зона, като върхът на пръскалката трябва да е колкото е възможно по-близо и като се опитвате да задръжите езика си надолу.
5. Силно притиснете плунжера за разпръскване – **НЕ ДИШАЙТЕ ДОКАТО ПРЪСКАТЕ!**

ЗА УПОТРЕБА ОТ ЕДИН ПАЦИЕНТ

Rx Only

Само Rx

LOT

Код на партида

REF

Каталожен номер



Предупреждение



Да не се използва, ако
опаковката е повредена




Не е стерилен



Електронни инструкции за употреба

eIFU Indicator

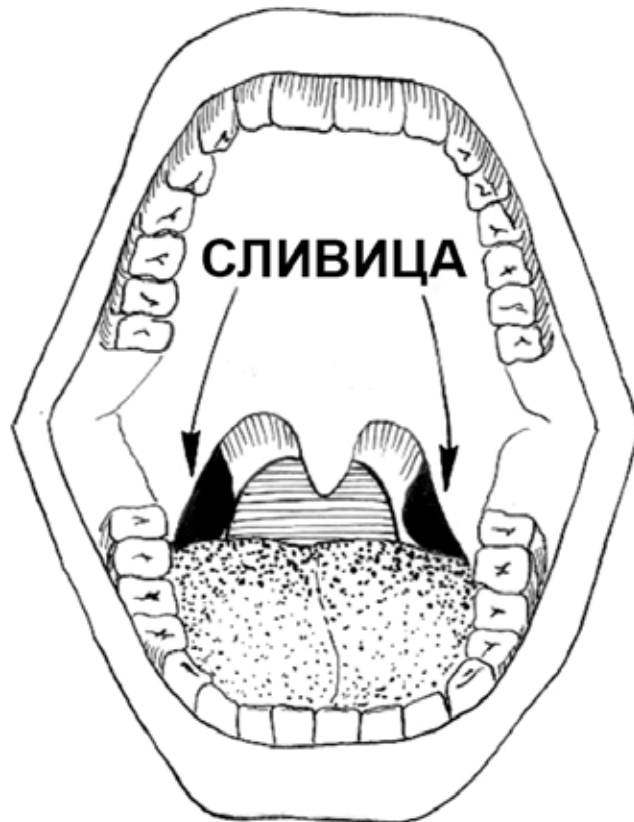

Brillient, LLC
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не е предназначен за използване от деца под 10-годишна възраст.

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_bg_BG