

# Aplikátor léčiv na krční mandle

## Návod k použití

Pouze na lékařský předpis. V regulačních právních předpisech je stanoveno, že tuto pomůcku smí prodávat pouze lékař nebo jiný oprávněný zdravotnický personál, anebo se smí prodávat pouze na lékařský předpis.

**ÚČEL POUŽITÍ:** Zařízení je určeno výlučně na podávání léčiv – účinných látek k léčbě krčních onemocnění. Tento lék lze užívat pouze v množství a dávkování, které určí lékař. Častější používání nebo dávkování nad rámec doporučeného množství může mít škodlivé účinky.

1. Odstraňte průhledný kryt.
2. Vysuňte aplikátor a namiřte ho na sebe (POZNÁMKA: pro správné použití musí být rameno aplikátoru v pravém úhlu).
3. Pevně držte lékovku, ukazovák položte na vrch rozprašovače.
4. Namiřte aplikátor přímo na postiženou oblast, přičemž hrot aplikátoru přiložte co nejbližší a jazyk se snažte držet stlačený dolů.
5. Pevně stiskněte rozprašovač, aby došlo k vystříknutí roztoku – ROZPRAŠOVANÝ ROZTOK NEVDECHUJTE!

### POUZE PRO JEDNOHO PACIENTA

**Rx Only** Pouze na lékařský předpis

**LOT** Kód šarže

**REF** Katalogové číslo



Upozornění




Nepoužívejte v případě poškozeného balení



Nesterilní



Viz elektronický návod k použití  
**eIFU Indicator**

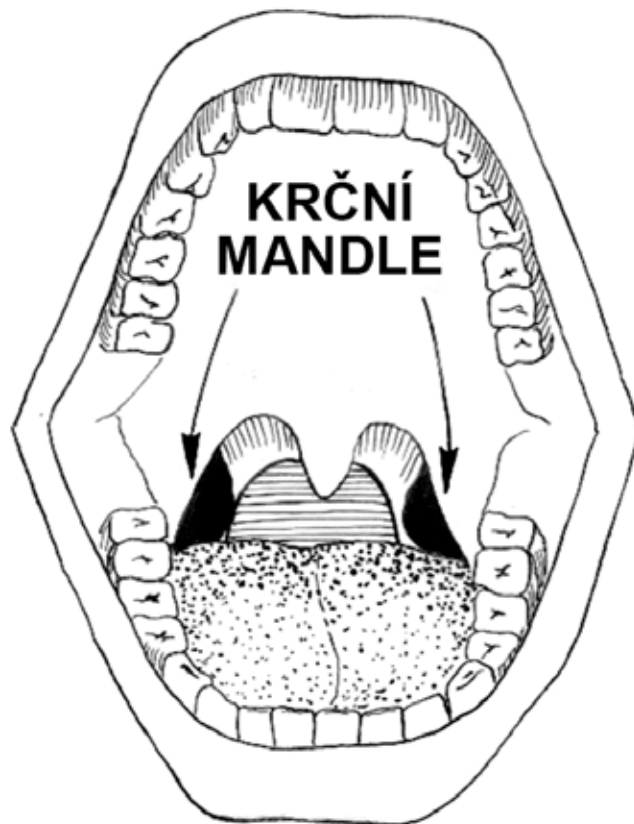

BrilliENT, LLC  
888 E Belvidere Road, Suite 212  
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH  
Langenhagener Straße 71  
D-30855 Langenhagen, Germany



**UPOZORNĚNÍ: Nesmí se podávat dětem do 10 let.**

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9\_cs\_CZ