

Halsspray

Brugsanvisning

Receptpligtig. Ifølge gældende lov må sprayen kun sælges af eller på recept fra en læge eller tilsvarende autoriseret person.

BEREGNET ANVENDELSE: Sprayen er beregnet til administration af medicinske stoffer til behandling af halslidelser. Medicinen må kun anvendes i den dosis og på den måde, som lægen har anvist. Hyppigere brug eller andre doser end de foreskrevne kan have skadelige effekter.

1. Fjern den gennemsigtige hætte.
2. Tag fat og sprayen, stræk armen, og vend sprayen mod dig (BEMÆRK! Armen skal være vinkelret).
3. Hold godt fast om sprayflasken, og anbring pegefingern på sprayhovedet.
4. Ret armen direkte mod det område, der skal behandles, så spidsen af sprayen er så tæt på området som muligt, og hold tungen nede.
5. Pres stemplet ned for at spraye medicinen – UNDLAD AT TRÆKKE VEJRET, MENS DU SPRAYER!


KUN TIL ENGANGSBRUG

Rx Only Receptpligtig

LOT Batchkode


REF Katalognummer

 Forsigtig!

 Må ikke bruges, hvis pakken er ødelagt

 Ikke-steril

 Elektronisk brugsanvisning
eIFU Indicator

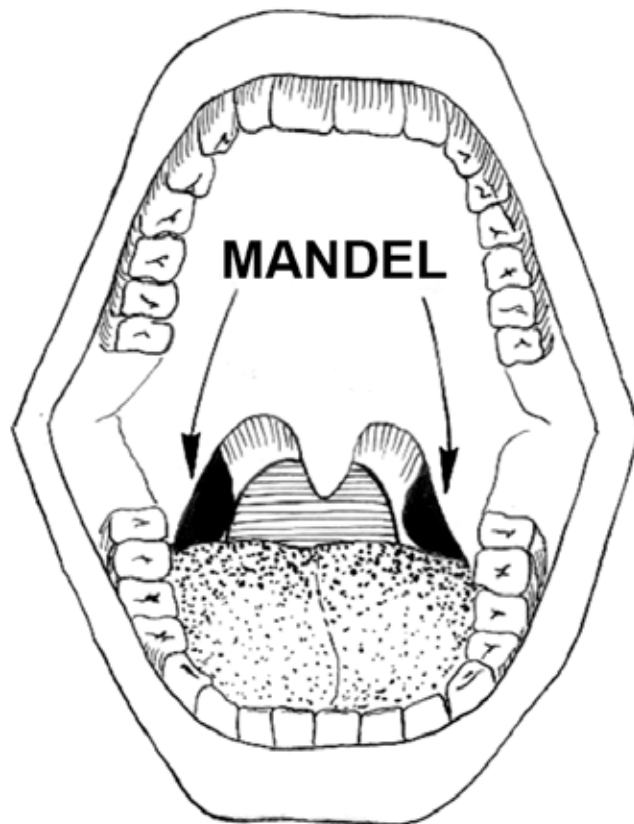

CE

 **BrilliENT, LLC**
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA

EC|REP **mdi Europa GmbH**
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany

 **FORSIGTIG! Må ikke anvendes af børn under 10 år.**

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_da_DK