

Mandel-Feuerlöcher Bedienungsanleitung

Nur zur Verwendung mit Rx. Dieses Produkt darf gemäß aufsichtsrechtlichen Vorschriften nur an Ärzte oder auf Anordnung eines Arztes oder einer anderen autorisierten medizinischen Fachperson verkauft werden.

VERWENDUNGSZWECK: Dieses Gerät dient spezifisch zum Verabreichen medizinischer Substanzen bei der Behandlung von Erkrankungen im Rachenraum. Dieses Medikament darf nur in der vom Arzt verordneten Menge und gemäß den Dosierungsvorgaben verwendet werden. Eine häufigere Verwendung oder eine Überschreitung der empfohlenen Dosis kann schädliche Folgen haben.

1. Die transparente Kappe abnehmen.
2. Den Sprüharm ausfahren und in Ihre Richtung halten (HINWEIS: Der Arm muss im rechten Winkel abstehen, um das Gerät richtig verwenden zu können).
3. Flasche fest in der Hand halten, dabei den Zeigefinger am Sprühkopf positionieren.
4. Mit dem Sprüharm auf den gewünschten Bereich zielen. Die Sprühvorrichtung möglichst nah an den Zielbereich bringen und die Zunge unten lassen.
5. Kolben fest drücken, um den Sprühnebel abzugeben – WÄHREND DES SPRÜHVORGANGS DEN ATEM ANHALTEN!

ZUR VERWENDUNG FÜR NUR EINEN PATIENTEN

Rx Only

NurRx

LOT

Chargencode

REF

Katalognummer



Vorsicht



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist




Nicht steril



Elektronische
Gebrauchsanweisung

eIFU Indicator

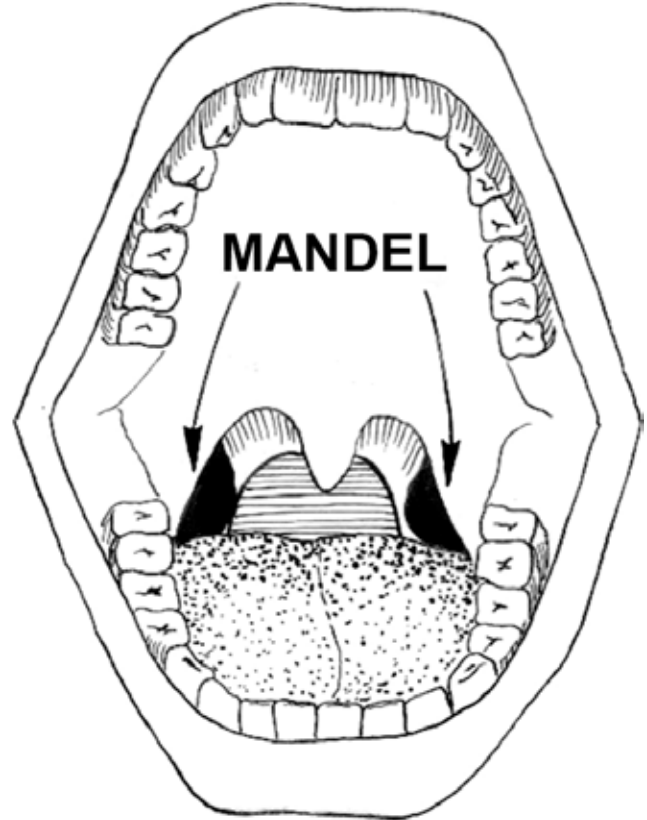

BrilliENT, LLC
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany



VORSICHT: Nicht zur Verwendung bei Kindern unter 10 Jahren geeignet.

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_de_DE