

Φαρυγγικό εκνέφωμα Οδηγίες χρήσης

Μόνο με συνταγή γιατρού. Το κανονιστικό δίκαιο περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται ειδικά για τη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών για την αντιμετώπιση διαταραχών του φάρυγγα. Αυτό το φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στην ποσότητα και στα δοσολογικά διαστήματα που όρισε ο γιατρός σας. Τυχόν συχνότερη χρήση ή δόση υψηλότερη από τη συνιστώμενη μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις.

1. Αφαιρέστε το διαφανές πώμα.
2. Εκτείνετε το βραχίονα ψεκασμού και κρατήστε τον στραμμένο προς το μέρος σας (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο βραχίονας πρέπει να βρίσκεται σε ορθή γωνία για σωστή έκπτυξη).
3. Κρατήστε σφικτά τη φιάλη με το δείκτη σας πάνω στην κεφαλή ψεκασμού.
4. Στοχεύστε απευθείας στην επιθυμητή περιοχή, πλησιάζοντας το άκρο του ψεκαστήρα όσο περισσότερο σας βολεύει και προσπαθήστε να κρατήσετε κάτω τη γλώσσα σας.
5. Πατήστε σταθερά το έμβολο για χορήγηση του εκνεφώματος – ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ!

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΑΣΘΕΝΗ

Rx Only

Μόνο με συνταγή γιατρού

LOT

Κωδικός παρτίδας

REF

Αριθμός καταλόγου



Προσοχή



Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά




Μη αποστειρωμένο



Ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης

eIFU Indicator

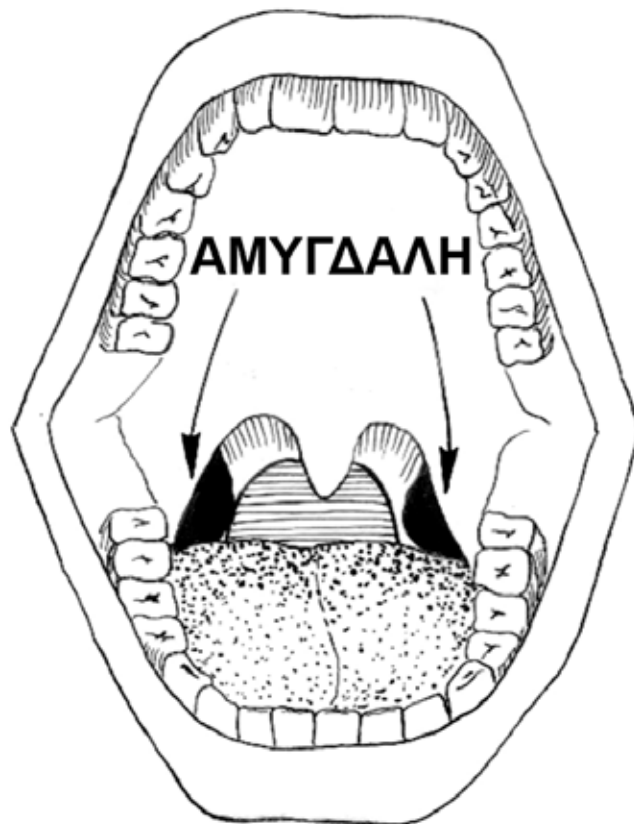

CE



Brilliant, LLC
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA

EC REP

mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany



ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_el_GR