

Extintor para amígdalas

Instrucciones de uso

Únicamente con prescripción médica. La legislación vigente establece que este dispositivo solo puede ser vendido por un médico u otros profesionales sanitarios autorizados o por prescripción facultativa.

USO PREVISTO: Este dispositivo está destinado específicamente a administrar sustancias médicas para tratar enfermedades de la garganta. Esta medicación solo debe administrarse conforme a la dosis y los intervalos que indique su médico. La ingesta de una dosis superior o en intervalos más frecuentes a lo indicado por el médico puede provocar efectos adversos.

1. Retire la tapa transparente.
2. Despliegue el brazo pulverizador y sujételo orientado hacia usted (ATENCIÓN: El brazo debe colocarse en el ángulo correcto para la correcta utilización).
3. Coloque el dedo índice en el cabezal pulverizador y sujete con firmeza la botella.
4. Apunte directamente con el brazo hacia la zona deseada, con la punta del pulverizador tan cerca como le permita continuar estando cómodo e intente dejar la lengua hacia abajo.
5. Presione con fuerza el émbolo para dispensar el aerosol.
¡NO RESPIRE MIENTRAS PULVERIZA!

USO EN UN SOLO PACIENTE

Rx Only

Únicamente con prescripción médica

LOT

Código de lote

REF

N.º de referencia



Precaución



No utilizar si el embalaje está dañado




No estéril



Instrucciones electrónicas de uso

eIFU Indicator

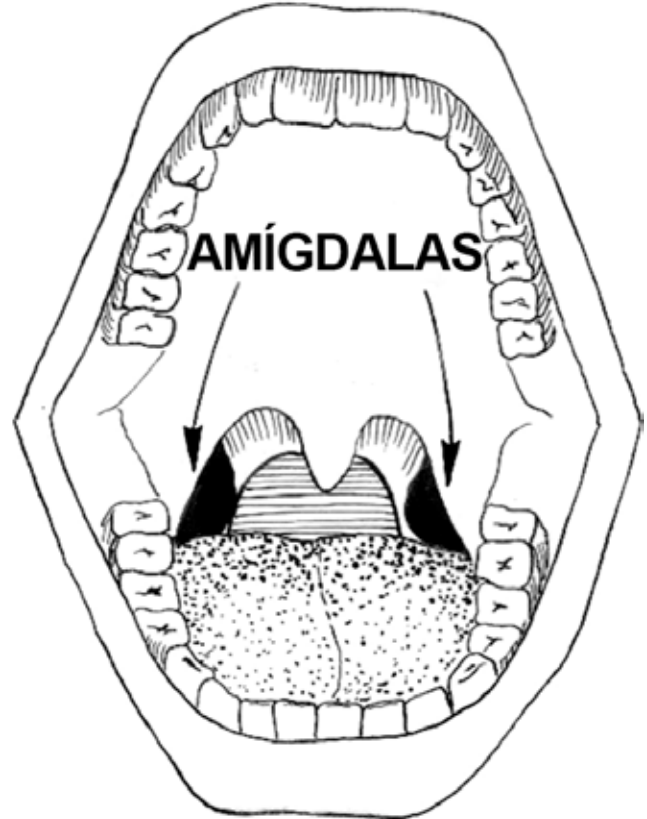

Brillient, LLC
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany



PRECAUCIÓN: No indicado para menores de 10 años.

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_es_ES