

Mandlisprei

Kasutusjuhend

KASUTUSEESMÄRK. See seade on mõeldud just meditsiiniliste ainete manustamiseks kurguhaiguste ravimiseks. Seda ravimit tohib kasutada ainult teie arsti ettekirjutatud annuses ja ajal. Sagedasem kasutamine või soovitatavast kogusest suurem annus võib avaldada kahjulikku mõju.

1. Eemaldage läbipaistev kork.
2. Sirutage pikendatud pihusti välja ja hoidke seda enda suunas (**MÄRKUS:** õigesti kasutamiseks peab pihusti olema õige nurga all).
3. Hoidke pudelit tugevalt, nii et nimetissõrm oleks pihusti otsikul.
4. Suunake pihusti otse soovitud alale, nii et pihusti otsak oleks sellele võimalikult lähedal ning teil oleks endiselt mugav, ja proovige hoida keelt all.
5. Sprei doseerimiseks vajutage tugevalt pihusti nuppu – **ÄRGE HINGAKE PIHUSTAMISE AJAL SISSE!**


KASUTADA AINULT ÜHEL PATSIENDIL

Rx Only Ainult retsepti alusel

LOT Partiitähis

REF Kataloogi number


 Ettevaatust

 Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud

 Mittesteriilne

 Elektrooniline kasutusjuhend
eFU Indicator

Ainult meditsiiniliseks kasutamiseks. Reguleerivad õigusaktid lubavad seadet müüa vaid arstile või muule volitatud meditsiinitöötajale või nende tellimusel.

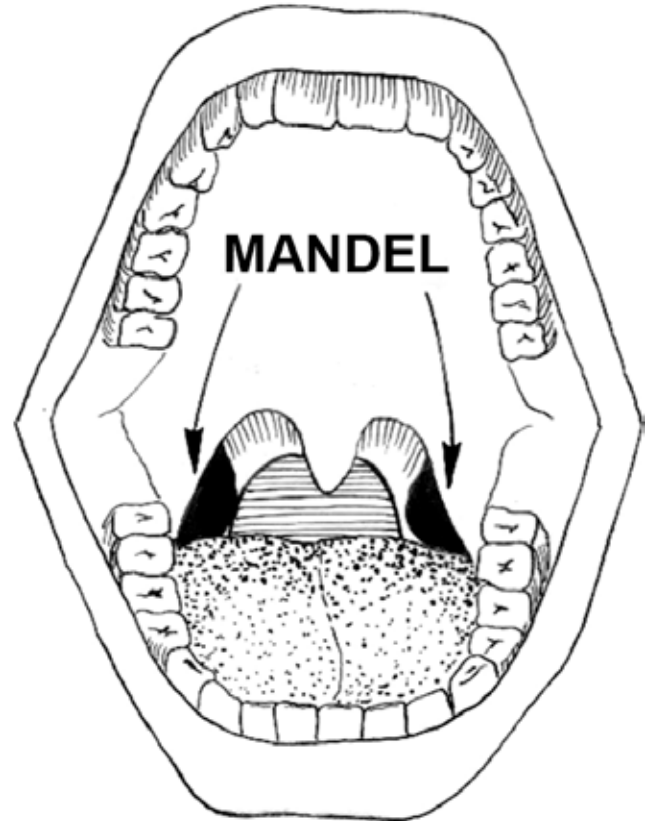

CE

 **Brilliant, LLC**
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA

EC REP **mdi Europa GmbH**
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany

 **ETTEVAATUST! Ei sobi kasutamiseks alla 10-aastastel lastel.** BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_et_EE