

Spray pour amygdales


Mode d'emploi

Uniquement sur ordonnance. En vertu du droit réglementaire, cet appareil ne peut être vendu que par, ou sur ordonnance d'un médecin ou de tout autre professionnel de santé autorisé.

USAGE PRÉVU : Cet appareil est spécifiquement destiné à administrer des substances médicamenteuses pour traiter les troubles de la gorge. Ce médicament doit être utilisé exclusivement en respectant la quantité et la fréquence prescrites par votre médecin. Pris en quantité plus importante que celle recommandée ou de façon répétée, il peut avoir des effets négatifs.

1. Enlevez le capuchon transparent.
 2. Dépliez le pulvérisateur et pointez-le vers vous (REMARQUE : le pulvérisateur doit avoir le bon angle pour être correctement déplié).
 3. Tenez la bouteille fermement, en posant l'index sur la tête de pulvérisateur.
 4. Dirigez le pulvérisateur directement sur la zone souhaitée, en approchant l'embout du pulvérisateur aussi près que possible et essayez de garder la langue abaissée.
 5. Appuyez fermement sur le piston pour pulvériser.
- NE PAS RESPIRER LORS DE LA PULVÉRISATION !

UTILISATION SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT

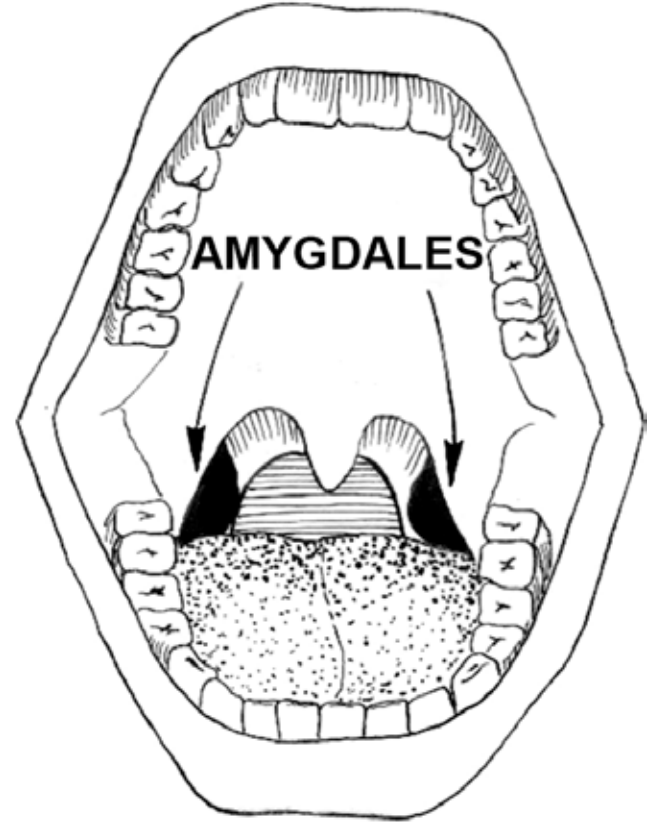


Rx Only Uniquement sur ordonnance

LOT Code de lot

REF Numéro de catalogue

 Avertissement

 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

 Non stérile

 Mode d'emploi électronique
eIFU Indicator

CE

 **Brillient, LLC**
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA

EC|REP **mdi Europa GmbH**
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany

 **AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 10 ans.**

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_fr_FR