

Gyulladáscsökkentő spray mandulagyulladás Használati útmutató

Kizárólag receptre kapható. A vonatkozó jogszabályok szerint a terméket kizárólag orvosok és erre felhatalmazott egészségügyi dolgozók értékesíthetik vagy írhatják fel.

RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLAT: Ez a termék kifejezetten a torokbetegségek kezelésére szolgáló gyógykészítmények beadására szolgál. A gyógykészítmény kizárólag a kezelőorvos által megjelölt adagolásban és gyakorisággal használható. A javasolt mennyiség vagy gyakoriság túllépése káros lehet az egészségre.

1. Vegye le az átlátszó kupakot.
2. Húzza ki az adagolókart, majd fordítsa maga felé (MEGJEGYZÉS: a megfelelő működéshez a karnak adott szögben kell állnia).
3. Tartsa erősen az üveget, a mutatóujját helyezze a szórófejre.
4. Irányítsa a kart pontosan a kezelendő területre úgy, hogy a spray vége ahhoz a lehető legközelebb essen. A nyelvét szorítsa le.
5. Nyomja meg határozottan a pumpát a spray működtetéséhez – A SPRAY HASZNÁLATA KÖZBEN NE LÉLEGEZZEN!


EGYETLEN BETEG SZÁMÁRA

Rx Only Kizárólag receptre


LOT Tételszám


REF Katalógusszám

 Figyelem

 Ha a csomagolás sérült,
ne használja

 Nem steril

 Elektronikus használati útmutató
eIFU Indicator

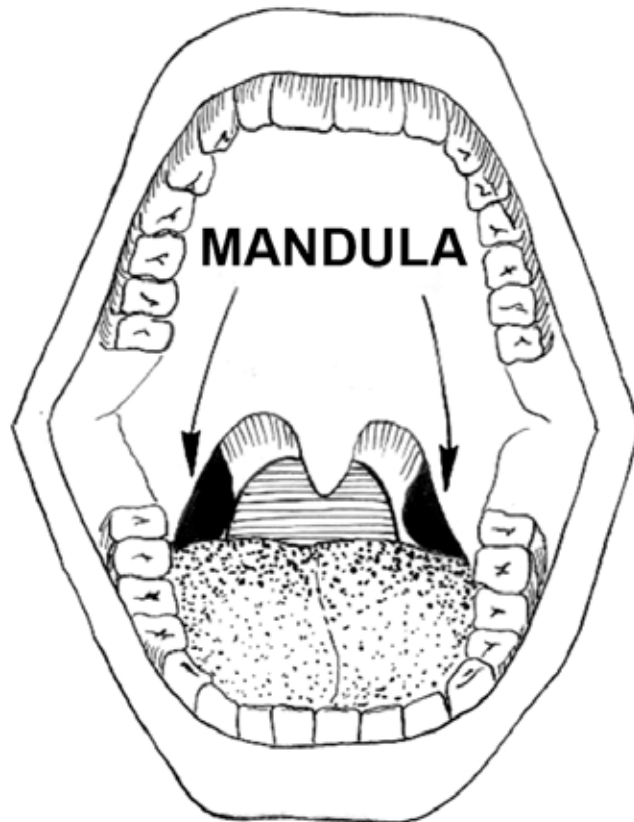

CE

 **BrilliENT, LLC**
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA

EC|REP **mdi Europa GmbH**
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany

 **FIGYELEM: 10 éven aluli gyermekeknek nem adható.**

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_hu_HU