

Spray antidolorifico per le tonsille

Istruzioni per l'uso

Solo su prescrizione medica. La legge limita la vendita del dispositivo solo a (o su prescrizione di) un medico o altro operatore sanitario autorizzato.

USO PREVISTO: Questo dispositivo è destinato specificamente alla somministrazione di sostanze medicinali per il trattamento dei disturbi della gola. Questo farmaco dovrebbe essere assunto solo nel rispetto di quanto prescritto dal proprio medico in termini di intervalli di somministrazione e dosi. Un'assunzione più frequente o un dosaggio superiore a quello consigliato possono avere effetti pericolosi.

1. Rimuovere il cappuccio trasparente.
2. Estendere lo spruzzatore e puntarlo verso la gola (NOTA: per il corretto funzionamento, lo spruzzatore deve essere perpendicolare al flacone).
3. Afferrare saldamente il flacone tenendo l'indice sulla testa dello spruzzatore.
4. Mirare direttamente alla zona desiderata, tenendo la punta dello spruzzatore nella posizione più comoda possibile e cercando di abbassare la lingua.
5. Premere con decisione lo stantuffo – **NON INALARE ARIA DURANTE L'OPERAZIONE!**

PER USO MONOPAZIENTE

Rx Only Solo su prescrizione medica

LOT Codice lotto

REF Numero di catalogo



Avvertenza



Non utilizzare se la confezione è danneggiata




Non sterile



Simbolo indicante "Istruzioni per l'uso in formato elettronico per dispositivi medici"

eIFU Indicator

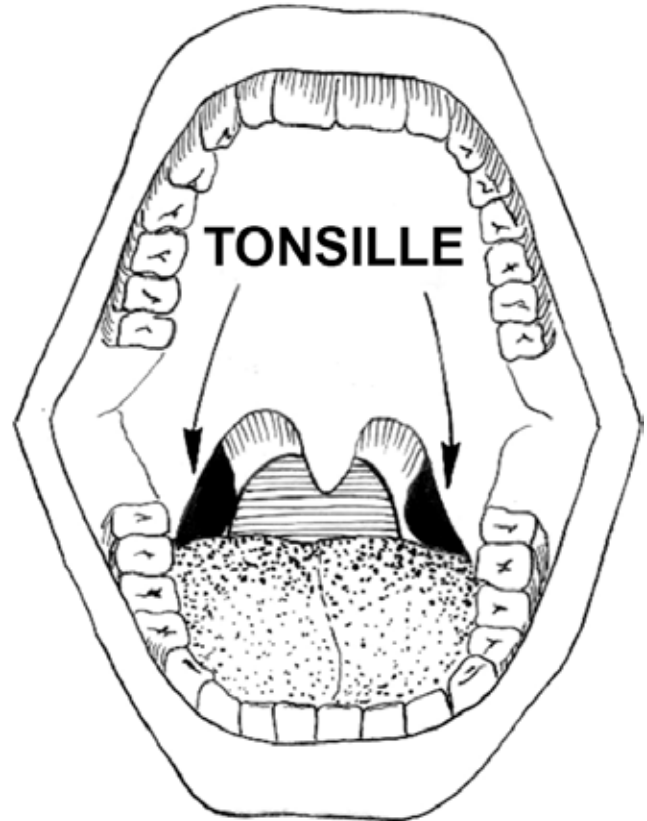

Brillient, LLC
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany



AVVERTENZA: Non adatto a bambini di età inferiore a 10 anni. BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_it_IT