

Tonzilių purkštuvai

Naudojimo instrukcija

Naudoti tik gydytojui paskyrus. Teisės normos nustato, kad prietaisą gali parduoti ar nurodyti parduoti tik terapeutas arba kitas įgaliotasis praktikuojantis gydytojas.

PASKIRTIS: Šis prietaisas skirtas vaistinėms medžiagoms, kuriomis gydamos gerklės ligos, purkšti. Šiuos vaistus reikia vartoti tik jūsų terapeuto nurodytais kiekiais ir laiku. Vartojant dažniau arba didesnes dozes, nei rekomenduojama, galimas žalingas poveikis.

1. Nuimkite skaidrų dangtelį.
2. Ištieskite purškimo petį ir laikykite nukreipę link savęs (PASTABA: kad tinkamai veiktų, petys turi būti pakreiptas reikiamu kampu).
3. Tvirtai laikykite buteliuką, smilių uždėję ant purškimo galvutės.
4. Nukreipkite petį tiesiai į norimą sritį taip, kad purkštuvu galiukas būtų kiek įmanoma arčiau jos, ir stenkitės laikyti liežuvį apačioje.
5. Stipriai paspauskite stūmoklį – PURKŠDAMI NEKVĖPUOKITE!

NAUDOTI VIENAM PACIENTUI

Rx Only Tik gydytojui nurodžius

LOT Partijos kodas

REF Katalogo numeris



Dėmesio



Nenaudoti, jei pakuotė pažeista




Nesterilus



Elektroninės naudojimo instrukcijos

eFU Indicator

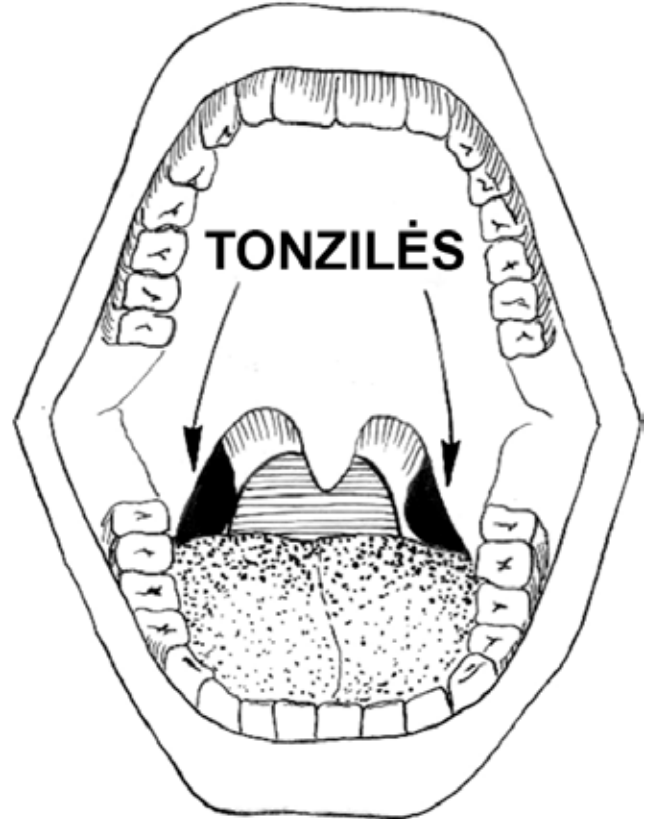

Brilliant, LLC
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany



DĖMESIO: Nenaudoti jaunesniems nei 10 metų vaikams.

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_lt_LT