

Ugunsdzēšamais aparāts mandelēm Lietošanas norādījumi

Recepšu medikaments. Reglamentējošais likums ierobežo ierīces pārdošanu, ko veic ārsts vai pilnvarots praktizējošais ārsts vai kāda persona viņu uzdevumā.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS: Šī ierīce ir konkrēti paredzēta medikamentu izsmidzināšanai, lai ārstētu problēmas ar kaklu. Šos medikamentus drīkst lietot tikai tādā daudzumā un tik bieži, kā ir norādījis jūsu ārsts. Biežākai vai lielāku devu lietošanai var būt kaitējoša iedarbība.

1. Noņemiet caurspīdīgo vāciņu.
2. Izvelciet izsmidzināšanas uzgali un turiet to pavērstu pret sevi (**PIEZĪME.** Lai viss darbotos pareizi, uzgalim ir jābūt taisnā leņķī.).
3. Stingri turiet pudelīti un uzlieciet rādītājpirkstu uz izsmidzināšanas galviņas.
4. Pavērsiet uzgali tieši uz vajadzīgo vietu, lai izsmidzinātāja gals būtu pēc iespējas tuvāk, bet tomēr neradītu nepatīkamas sajūtas, un mēģiniet turēt mēli uz leju.
5. Stingri nospiediet virzuli, lai izsmidzinātu — **NEVEICIET IEELPU IZSMIDZINĀŠANAS LAIKĀ!**

LIETOŠANAI VIENAM PACIENTAM

Rx Only Recepšu medikaments


LOT Partijas kods


REF Kataloga numurs

 Uzmanību!


 Nelietojiet, ja iepakojums ir bojāts

 Nesterils

 Elektroniskie lietošanas norādījumi
eIFU Indicator

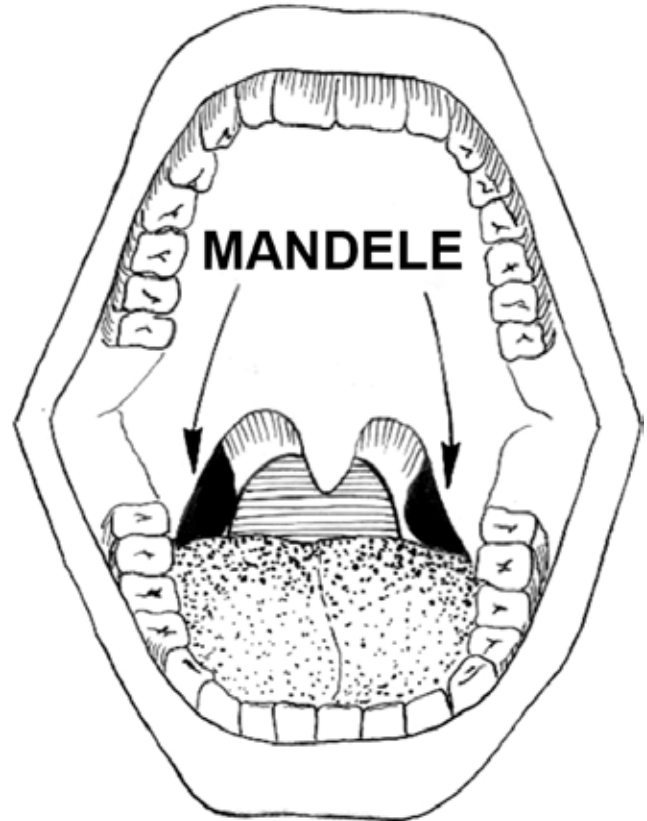

CE

 **Brilliant, LLC**
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030, USA

EC REP **mdi Europa GmbH**
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany

 **Uzmanību! Nelietojiet bērniem, kas jaunāki par 10 gadiem.** BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_lv_LV