

Blusapparaat voor pijnlijke keelamandelen Gebruiksaanwijzing

Alleen op voorschrift. De wetgeving beperkt de verkoop van dit apparaat tot de verkoop door of op voorschrift van een arts of andere erkende medicus.

BEDOELD GEBRUIK: Dit apparaat is specifiek bedoeld om geneesmiddelen toe te dienen voor de behandeling van keelaandoeningen. Dit geneesmiddel mag alleen worden gebruikt in de door uw arts voorgeschreven hoeveelheid en dosering. Een frequenter gebruik of een dosering boven de aanbevolen hoeveelheden kan schadelijke gevolgen hebben.

1. Verwijder de doorzichtige dop.
 2. Vouw de verstuiver uit en houd deze naar u gericht (OPMERKING: richt uw arm in de juiste hoek voor een correcte toediening).
 3. Houd het flesje stevig vast, met uw wijsvinger op de kop van de verstuiver.
 4. Richt uw arm rechtstreeks op het gewenste gebied, plaats het uiteinde van de verstuiver zo dicht als comfortabel mogelijk is en probeer uw tong omlaag te houden.
 5. Druk stevig op de plunjer om het middel te verstuiven.
- NIET INADEMEN TIJDENS HET VERSTUIVEN!**

TE GEBRUIKEN VOOR ÉÉN PATIËNT

Rx Only Alleen op voorschrift

LOT Batchcode

REF Catalogusnummer



Waarschuwing



Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd




Niet-steriel



Elektronische gebruiksaanwijzing

eFU Indicator

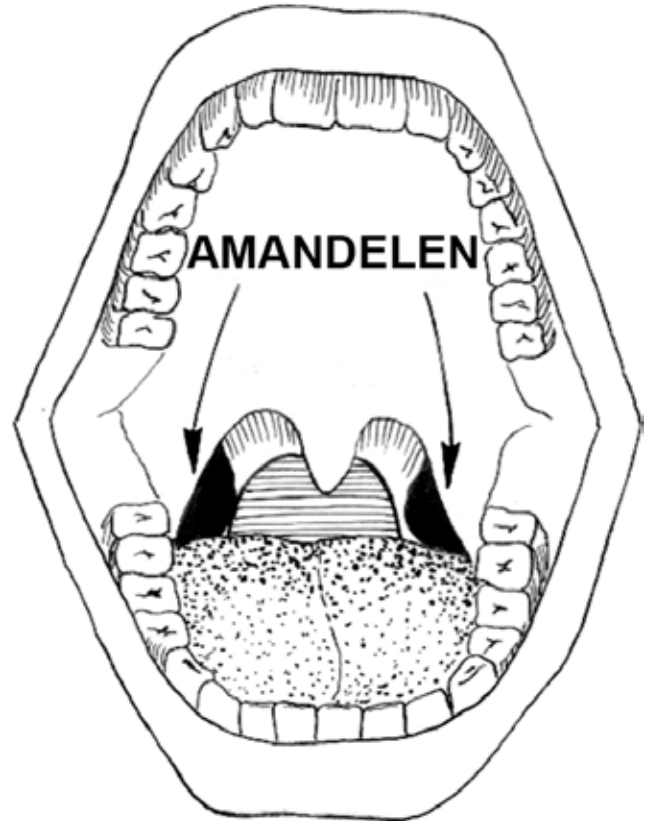

Brilliant, LLC
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany



WAARSCHUWING: Niet voor gebruik bij kinderen jonger dan 10 jaar.

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_nl_NL