

# Spray na zapalenie migdałków

## Instrukcja stosowania

Produkt wydawany tylko na receptę. Przepisy regulacyjne dopuszczają sprzedaż tego wyrobu wyłącznie przez lekarza bądź osobę posiadającą stosowne uprawnienia lub też na zlecenie lekarza bądź takiej osoby.

**WSKAZANIA:** Niniejszy wyrób jest przeznaczony konkretnie do podawania substancji leczniczych w celu leczenia chorób gardła. Lek należy stosować wyłącznie w sposób zgodny z zalecą przez lekarza dawką oraz częstotliwością podawania. Częstsze użycie lub stosowanie dawek większych niż zalecane może być szkodliwe dla zdrowia.

1. Zdjąć przezroczystą zatyczkę.
2. Wysunąć dyszę i skierować ją w stronę twarzy (UWAGA: aby umożliwić odpowiednie rozpylenie preparatu, dysza musi być ustawiona pod odpowiednim kątem).
3. Pojemnik trzymać mocno, umieszczając palec wskazujący na pompce rozpylającej.
4. Skierować dyszę bezpośrednio na wybrany obszar, umieszczając końcówkę rozpylającą tak blisko, jak to możliwe, starając się opuścić język w dół.
5. Mocno nacisnąć pompkę, aby rozpylić preparat — **NIE WDYCHAĆ PODCZAS ROZPYLANIA!**


### DO STOSOWANIA U JEDNEGO PACJENTA


**Rx Only** Produkt wydawany tylko na receptę

**LOT** Oznaczenie partii


**REF** Numer katalogowy

 Uwaga


 Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone

 Wyrób niesterylny

 Elektroniczna instrukcja obsługi  
**eIFU Indicator**

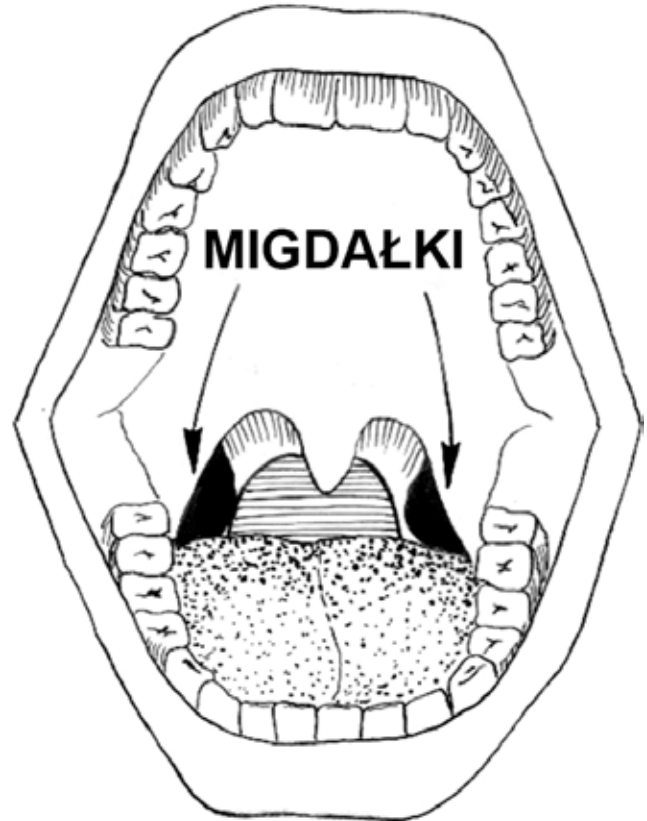

**CE**

 **Brillient, LLC**  
888 E Belvidere Road, Suite 212  
Grayslake, IL 60030 USA

**EC|REP** **mdi Europa GmbH**  
Langenhagener Straße 71  
D-30855 Langenhagen, Germany

 **UWAGA: Nie stosować u dzieci poniżej 10. roku życia.**

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9\_pl\_PL