

Spray pentru calmarea inflamațiilor de la nivelul amigdalelor Instrucțiuni de utilizare

Acest medicament se eliberează numai pe bază de prescripție medicală. Conform reglementărilor legislative, acest dispozitiv poate fi vândut numai de către un sau la recomandarea unui medic sau practician medical autorizat.

DESTINAȚIA UTILIZĂRII: Acest dispozitiv este destinat în special administrării de substanțe medicamentoase pentru tratarea tulburărilor ORL. Acest medicament trebuie să fie utilizat numai în cantitatea, dozarea și cu frecvența recomandate de medicul dumneavoastră. Creșterea frecvenței de utilizare sau dozarea în cantități mai mari decât cele recomandate pot avea efecte nocive.

1. Scoateți capacul transparent.
2. Extindeți brațul de pulverizare și îndreptați capul de pulverizare spre dumneavoastră (**OBSERVAȚIE:** pentru o administrare corespunzătoare, brațul trebuie să fie poziționat în unghi drept).
3. Țineți ferm recipientul, cu degetul arătător pe capul de pulverizare.
4. Orientați brațul direct spre zona dorită, apropiind capul de pulverizare cât mai mult posibil de aceasta, fără a crea disconfort, și încercând să mențineți limba în partea de jos a cavității bucale.
5. Apăsați ferm pistonul pentru a pulveriza medicamentul – **NU INHALAȚI PRODUSUL ÎN TIMPUL PULVERIZĂRII ACESTUIA!**

UTILIZARE PENTRU UN SINGUR PACIENT


Rx Only Numai pe bază de prescripție medicală

LOT Codul lotului

REF Număr de catalog



Atenție

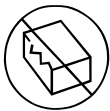

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat




Nesteril



Instrucțiuni de utilizare în format electronic

eIFU Indicator

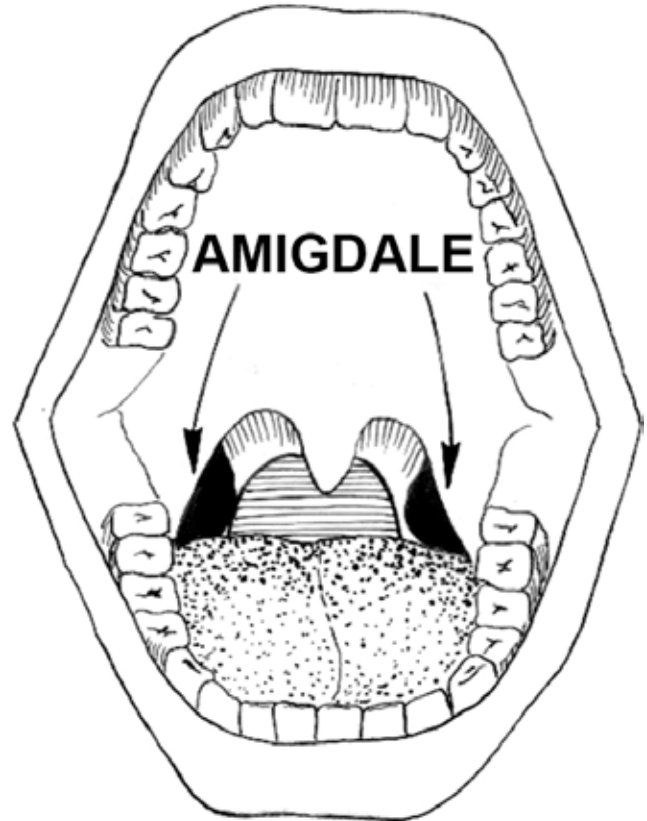

Brilliant, LLC
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany



ATENȚIE: Produsul nu este destinat copiilor cu vârsta mai mică de 10 ani.

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_ro_RO