

# Aplikátor liečiv na krčné mandle

## Návod na použitie

Len na lekársky predpis. V regulačných právnych predpisoch sa ustanovuje, že túto pomôcku môže predávať len lekár alebo iný oprávnený zdravotnícky personál, alebo sa môže predávať len na lekársky predpis.

**ÚČEL POUŽITIA:** Zariadenie je určené výlučne na podávanie liečiv – účinných látok na liečbu krčných ochorení. Tento liek možno užívať iba v množstve a dávkovaní, ktoré určí lekár. Častejšie používanie alebo dávkovanie nad rámec odporúčaného množstva môže mať škodlivé účinky.

1. Odstráňte priehľadný kryt.
2. Vysuňte aplikátor a namierte ho na seba (**POZNÁMKA:** na správne použitie musí byť rameno aplikátora v pravom uhle).
3. Pevne držte liekovku, ukazovák položte na vrch rozprašovača.
4. Namierte aplikátor priamo na postihnutú oblasť, pričom hrot aplikátora priložte čo najbližšie a jazyk sa snažte držať stlačený dole.
5. Pevne stlačte rozprašovač, aby došlo k vystreknutiu roztoku – **ROZPRAŠOVANÝ ROZTOK NEVDYCHUJTE!**

### LEN PRE JEDNÉHO PACIENTA


**Rx Only** Len na lekársky predpis

**LOT** Kód šarže

**REF** Katalógové číslo



Upozornenie

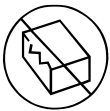

Nepoužívajte v prípade poškodeného balenia




Nesterilné



Pozri elektronický návod na používanie

**eIFU Indicator**

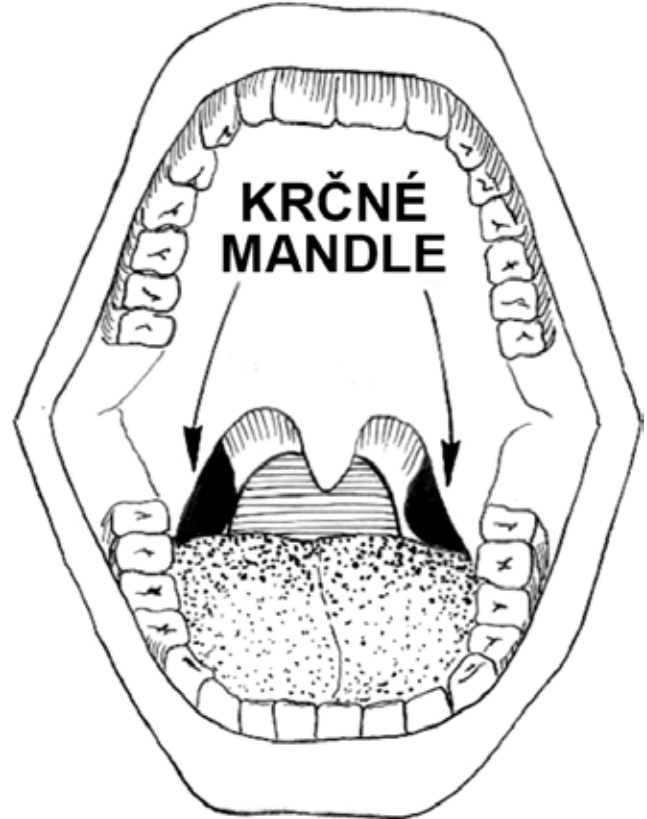

Brillient, LLC  
888 E Belvidere Road, Suite 212  
Grayslake, IL 60030 USA



mdi Europa GmbH  
Langenhagener Straße 71  
D-30855 Langenhagen, Germany



**UPOZORNENIE: Nesmie sa podávať deťom do 10 rokov.**

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9\_sk\_SK