

Smärtstillande halsspray

Bruksanvisning

Receptbelagd produkt. Produkten får enligt lag endast säljas av, eller på recept från, läkare eller annan behörig vårdpersonal.

AVSEDD ANVÄNDNING: Produkten är specifikt avsedd för att administrera medicin mot halssjukdomar. Medicinen ska endast användas i den dos och med det intervall som din läkare har angivit. Tätare användning eller doser över den rekommenderade kan leda till skador.

1. Ta bort det genomskinliga locket.
2. Dra ut sprayarmen och håll den så att den pekar mot dig (OBS! Armen måste ha rätt vinkel för att kunna fällas ut ordentligt).
3. Håll flaskan i ett stadigt grepp med pekfingeret på sprayhuvudet.
4. Sikta rakt på det drabbade området, håll sprayarmens spets så nära som möjligt utan att det blir obehagligt och försök att hålla tungan nere.
5. Tryck ner kolven med fast hand för att spraya – **ANDAS INTE IN NÄR DU SPRAYAR!**

FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV EN PERSON


Rx Only Receptbelagd produkt

LOT Batchkod


REF Katalognummer

 Varning

 Använd inte produkten om förpackningen är skadad

 Icke-steril

 Elektronisk bruksanvisning
eFU Indicator

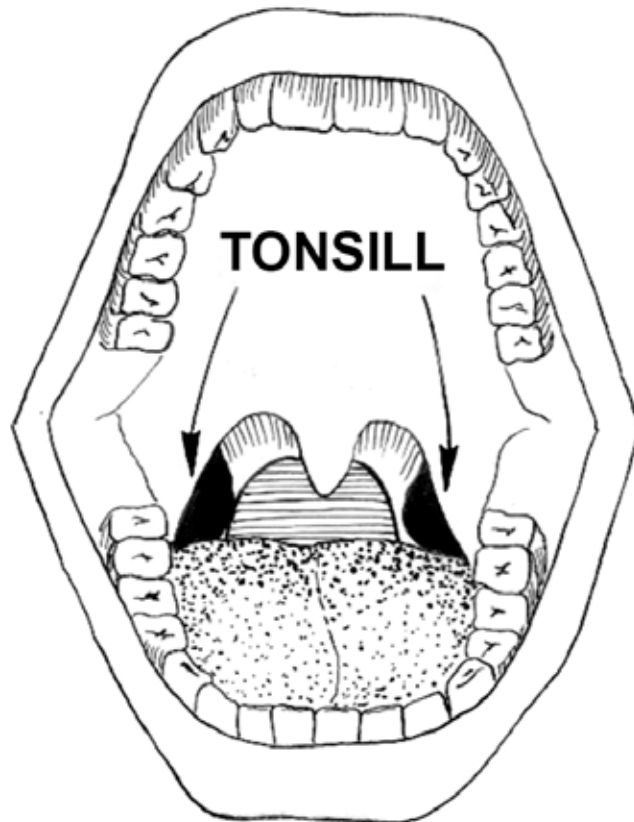

CE

 **Brilliant, LLC**
888 E Belvidere Road, Suite 212
Grayslake, IL 60030 USA

EC REP **mdi Europa GmbH**
Langenhagener Straße 71
D-30855 Langenhagen, Germany

 **WARNING: Används inte på barn under 10 år.**

BR-LS-0001(Rev 1)2017-9_sv_SE